



# *VibFlow* by Dr.CODI

ÖSSZECSUKHATÓ ÉS MEGHOSSZABBÍTHATÓ DUPLA MASSZÍROZÓ  
KÉZIKÖNYV

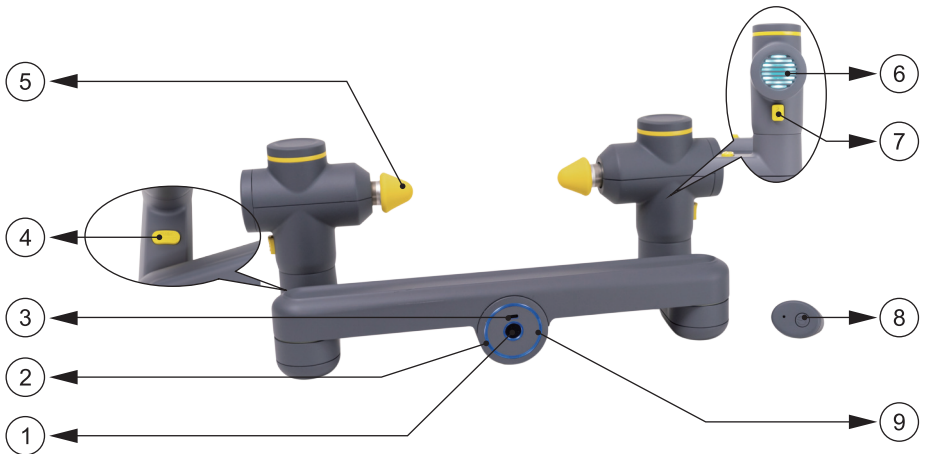

- ① Főkapcsoló & Sebességbeállítások gomb
- ② Sebesség LED jelzőfény (3 különböző szín)
- ③ Töltőport (USB C-Type)
- ④ Hosszabbító vezérlőgomb (150 fokig)
- ⑤ Cserélhető fejrögzítés
- ⑥ Oldalsó szellőzés
- ⑦ Szögbeállító gomb (akár 230 fok)
- ⑧ Távirányító főkapcsolója & Sebességbeállítások gomb
- ⑨ Sebesség LED jelzőfény (3 sebesség) és akkumulátor töltöttségi szint LED jelzőfény

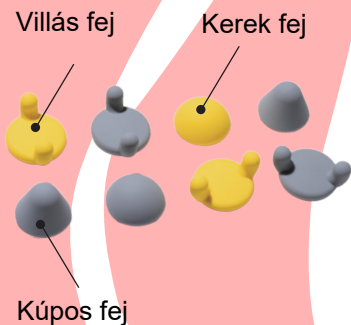

### Villás fej

A villás fej pontosságot és erőt biztosít a két ágán keresztül, a maximális kihasználhatóság érdekében. Ugyanolyan erővel hat, mint a kúpos fej, miközben nagyobb felületet fed le. Ez különösen hasznossá teszi nagyobb izomcsoportokon, mint például a combhajlító izom, négyfejű izom és farizom.

### Kúpos fej

A kúpos fej kis felülete könnyen megcélozhatja a kemény területeket, így ideális koncentrált masszázshoz a test pontos területein. Ez a fej biztosítja a legnagyobbbb erőt az összes fejtípus közül, és ideális választás a mélyszöveti masszázshoz. Ha kellemetlen érzést érez a mély szövetekben, a trigger pontokban, a kis izomterületeken (például a lábokban és a csuklóokban), vagy fáradtságot érez a talpában és a tenyérben, ez a legmegfelelőbb fejtípus.

### Kerek fej

A kerek masszázsfaj a masszázspisztolyok leggyakrabban használt feje. Mélyen behatolhat az izmokba, enyhíti a fájdalmat, és szinte minden testrészen használható, beleértve a mellkasi izmokat, a trapéz izmokat, a latissimus dorsit, a farizmot és a comb izmait, például a combhajlító, a quadriceps és a vádli izmait.

## Felhasználói kézikönyv

# Kérjük, használat előtt olvassa el

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék be- és kikapcsolása & a masszírozási sebesség módosítása

1. A VibFlow bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
2. A VibFlow kikapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, amikor a VibFlow bekapcsolt állapotban van.
3. A sebesség beállítása: Kattintson a bekapcsológombra a VibFlow bekapcsolása után az 1. sebességre a masszírozásának megkezdéséhez. Kattintson ismét a bekapcsológombra a sebesség növeléséhez.
4. Kattintson ismét a gombra 4. sebességen, hogy visszaállítsa az 1. sebességre.

### A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. A VibFlow első használatakor ügyeljen arra, hogy az akkumulátort teljes kapacitással töltsen fel.
2. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a LED jelzőfény pirosan villog.
3. A jelzőfény töltés közben kéken villog, és folyamatosan világít, amikor tele van.
4. Töltés közben a készülék funkciói nem működnek.

\* A LED színei megfelelnek a töltöttségi szintnek a piros (alacsony), zöld (középső) és kék (teljesen feltöltött) között

## INTELLIGENS IDŐZÍTÉS

A VibFlow 10 perc működés után automatikusan leáll a túlzott használat elkerülése érdekében. A következő használatához újra kell indítani.

## A THR TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

1. Közvetlenül a VibFLOW bekapcsolása után nyomja meg 5-ször a távirányító gombját, amíg az párosítva nem lesz.
2. Nyomja meg a távirányító gombot a különböző szintek kiválasztásához.

## Műszaki specifikáció.

A termék súlya: 1,31kg / Termék mérete: 380 \* 180 \* 160 (mm)

Szín: Szürke és sárga / sebességfeszültség: DC 5V 2A

Állítható rezgési sebesség: 1,500-2,000-2,500-3,000RPM

Töltési és kisütési idő: 3 óra & 4 óra

Akkumulátor specifikáció: 10.8V / 2,500mAh töltő USB C-típus

## További kérdések és válaszok

Mik a VibFlow előnyei összehasonlítva más ütőterápiás eszközzel?

A VibFLOW egy élvonalbeli masszázsszék, amely innovatív és ergonomikus, karjai 230°-ban állíthatók, hogy könnyedén elérjék az összes nehezen elérhető területet.

Mik a VibFlow méretei?

380 \* 180 \* 160 (mm).

Mekkora a VibFlow súlya?

Az egység nettó tömege 1,31 kg.

Automatikusan leáll?

Igen, van időzítője. Az előre beállított programja 10 percet üzemel munkamenetenként. Új munkamenet indításához a készüléket újra kell indítani. Ennek célja, hogy gondoskodjon a biztonságáról.

Hány RPM-el dolgozik a VibFlow?

A VibFlow négy különböző rezgésszinttel dolgozik 1,500RPM és 3,000RPM között. Ezen a tartományon belül állítható a be/ki gomb megnyomásával vagy távirányítóval.

Mik a tartozékok?

A tartozékok USB-kábel (C típus)\*1, felhasználói kézikönyv\*1, és távirányító\*1.

Az újratölthető akkumulátor könnyen cserélhető?

Nem az. Kérjük, keresse helyi partnerünket további információért.

Megvásárolhatom a távirányítót külön?  
Elvesztettem.

Igen, megteheti. Kérjük, keresse helyi partnerünket további információért.

Hogyan állíthatom alaphelyzetbe az új távirányítót?

Az új távirányító beállításához nyomja meg a vezérlő gombot 5-ször gyorsan, utána nyomja meg a VibFlow be/ki gombját.

A VibFlow vízálló?

Azt mondanánk, hogy nem. Van egy lyuk az USB-töltő csatlakozójánál, ahol a víz bejuthat. Ráadásul a be/ki gomb sem hermetikusan zárt. A borítás vízálló mindazonáltal.

Zajt ad használat közben?

A termék jellegéből adódóan ad némi zajt. Azt javasoljuk, hogy a terméket jógaszőnyeg vagy hasonló felületen használja.



Honnan tudom, hogy teljesen fel van töltve?

Töltés közben a VibFlow folyamatos zöld fényt mutat, ha teljesen fel van töltve, a fény nem világít.

Mennyi ideig tart egy teljesen lemerült akkumulátor újratöltése??

Ez a töltőponttól függ. Általában kevesebb, mint 3 óra az ürestől a teliig tölteni tipikus töltőporttal.

Mennyi az üzemidő?

Ez a használat intenzitásától függ, de az üzemidő akár 4 óra is lehet.

## FELELŐSSÉG KIZÁRÁS

### FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne merítse vízbe. Folyadékotól és hőforrásoktól távol tartandó. Tartsa a szellőzőnyílásokat portól és törmeléktől mentesen.
2. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni.
3. Ne működtesse folyamatosan egy óránál tovább. Hagyja az eszközt 30 percig pihenni, mielőtt újra felhasználná.
4. Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a készülék akkumulátorából.
5. Kizárólag felnőtt használatra. Ne használja, ha sérült. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS, TŰZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELERÜLÉSÉHEZ, TARTSA BE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT!

1. Kizárólag felnőtt használatra.
2. Csak száraz, tiszta testfelületen, ruházat felett használja, enyhén nyomja meg és mozgassa a testen régióként körülbelül 60 másodpercig.
3. A VibFlow-t csak a test lágy szövetein használja anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna. Ne használja a fejen vagy a test bármely kemény vagy csontos területén.
4. Csak azokat az applikátorokat használja, amelyek a legjobb kívánt hatást biztosítják.
5. A véráláfutás a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól függetlenül előfordulhat. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jeleire.

6. Tartsa távol az ujjait, a haját vagy bármely más testrészét az applikátor tengelyétől és hátoldalától, mert becsípődhet.
7. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a VibFlow szellőzőnyílásaiba
8. Ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy víz kerüljön a VibFlow szellőzőnyílásaiba.
9. Ne ejtse le és ne használja vissza a VibFlow terméket.
10. Minden használat előtt gondosan vizsgálja meg a készüléket és az akkumulátort.
11. Ne manipulálja és ne változtassa meg a VibFlow-t semmilyen módon.
12. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a VibFlow működését vagy töltését.

## **JOGI NYILATKOZAT: KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A VIBFLOW-T ANÉLKÜL, HOGY ELŐZETESEN ENGEDÉLYT KÉRNE ORVOSÁTÓL, HA A FENTIEK BÁRMELYIKE FENNÁLL.**

Terhesség, cukorbetegség olyan szövődményekkel, mint a neuropátia vagy a retina károsodása, szívritmus-szabályozók kopása, közelmúltbeli műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, közelmúltbeli ízületi protézisek vagy IUD-k, fémcsapok vagy lemezek, vagy bármilyen aggodalom a fizikai egészségével kapcsolatban. A törékeny egyéneket és gyermekeket felnőttnek kell kisélnie, ha bármilyen vibrációs eszközt használnak. Ezek a kontraindikációk nem jelentik azt, hogy nem tud vibrációs vagy edzőeszközt használni, de javasoljuk, hogy először forduljon orvoshoz.

## GARANCIA

HA A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVEN BELÜL A TERMÉK ANYAGHIBA, VAGY HIBÁS KIVITELEZÉS MIATT MEGHIBÁSODIK, JAVÍTJUK VAGY KICSERÉLJÜK A SZÜKSÉGES ALKATRÉSZT, VAGY A TELJES KÉSZÜLÉKET INGYENESEN.

### EZ A GARANCIA KIZÁRJA:

- a) balesetből, visszaélésből, helytelen kezelésből vagy szállításból eredő károk;
  - b) jogosulatlan javításnak alávetett eszközök;
  - c) nem az utasításoknak megfelelően használt eszközök;
  - d) a termék költségét meghaladó kárigény;
  - e) a szállított termék romlása, amely az ügyfél történő rendellenes tárolásból és/vagy biztonsági feltételekből ered;
  - f) a vásárlást igazoló dátummal ellátott bizonylat benyújtásának elmulasztása.
- Egyes országok nem engedélyezik a károk korlátozását, ezért előfordulhat, hogy az előzetes korlátozás nem vonatkozik Önre. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat garantál, de más jogok országonként és államonként eltérőek lehetnek. Ez a jótállási szolgáltatás az üzemeltetési szabályzatokon és a nemzetközi forgalmazókon keresztül érhető el.

Ha további információra van szüksége, ne habozzon  
kapcsolatba lépni velünk.

[www.r-med.com](http://www.r-med.com)

